

Travixx by  **medipoint**



Gebruikershandleiding
Travixx Comfort Lite Plus

Inhoudsopgave

Algemene introductie	4
1. Identificatie	5
2. Algemene informatie	6
2.1 Componenten en opbouw van uw rolstoel	6
2.2 Algemene uitleg over uw rolstoel	6
3. Veiligheidsvoorschriften	7
3.1 Algemene veiligheidsvoorschriften	7
3.2 Waarschuwingen voor veilig gebruik	7
4. Gebruikersinstructies	9
4.1 De balans	9
4.1.1 In- en uitstappen	9
4.2 Buigen en/of reiken	9
4.2.1 Naar voren buigen en/of reiken	9
4.2.2 Naar de zijkant buigen en/of reiken	10
4.2.3 Naar achteren buigen en/of reiken	10
4.3 Het op- en afgaan van verhogingen	10
4.3.1 Het opgaan van een verhoging	10
4.3.2 Het afgaan van een verhoging	11
4.4 Het op- en afgaan van hellingen	11
4.4.1 Het opgaan van een helling	11
4.4.2 Het afgaan van een helling	11
4.5 Het op- en afgaan van trappen	12
4.5.1 Het opgaan van een trap	12
4.5.2 Het afgaan van een trap	12
5. Specificaties	13
6. Componenten van de Travixx Comfort Lite Plus	14
6.1 Het in- en uitvouwen van de rolstoel	15
6.1.1 Het invouwen van de rolstoel	15
6.1.2 Het uitvouwen van de rolstoel	16
6.2 De duwhandvatten	16
6.3 De armleuningen	17
6.4 De rugleuning	18
6.5 De rem	18
6.6 De beensteunen	19

6.7 De voetplaten	20
6.7.1 De voetplaten opklappen	20
6.7.2 De voetplaten in hoogte verstellen	20
6.8 De anti-tip wielen	21
6.9 De wielen	21
6.9.1 De voorwielen	21
6.9.2 De achterwielen	21
6.10 De zitting	22
7. Transport en vervoer van uw rolstoel	23
7.1 De rolstoel opvouwen	23
7.2 De rolstoel uitvouwen	24
8. Onderhoud	25
8.1 De banden	25
8.1.1 PU banden	25
8.2 De remmen	25
8.3 Het kruisframe	26
8.4 De achterwielen	26
8.5 De zwenkwieltjes en de voorvork	26
8.6 De bekleding	27
8.7 Het reinigen van de rolstoel	27
8.8 Periodiek onderhoud aan uw rolstoel	27
8.9 Jaarlijkse controle en onderhoud	28
9. Probleemanalyse en oplossingen	29
10. Garantie	30
10.1 Garantietoepassing	30
10.2 Garantie bepalingen	30

Algemene introductie

Voordat u gebruik gaat maken van uw nieuwe Travixx Comfort Lite Plus, dienen u en uw eventuele begeleider deze gebruikershandleiding volledig te lezen en te begrijpen. Wanneer u deze gebruikershandleiding gelezen heeft en begrijpt, gaat u tevens akkoord met de in deze gebruikershandleiding genoemde voorwaarden.

Op dit moment maakt u kennis met een kwaliteitsproduct geproduceerd door Excel Mobility, op de markt gebracht door Medipoint. Wij willen u bedanken voor het vertrouwen in dit product. De Travixx Comfort Lite Plus is een echt kwaliteitsproduct. Het beleid van Excel Mobility is erop gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze producten door te ontwikkelen. Wij behouden ons dan ook het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen in deze gebruikershandleiding.

Het is belangrijk dat u deze gebruikershandleiding voor het gebruik van uw rolstoel aandachtig doorleest. De gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie over het veilig gebruiken en het onderhoud van uw rolstoel. Wij raden u aan deze gebruikershandleiding goed te bewaren.

De veiligheidsvoorschriften in deze gebruikershandleiding zijn algemene aanwijzingen die gezien moeten worden als globale richtlijnen. Het is mogelijk dat u uw eigen manieren ontwikkelt voor veelvoorkomende handelingen. Wij willen u echter adviseren een beroep te doen op een deskundige voor assistentie bij het ontwikkelen van veilige en effectieve technieken met betrekking tot uw dagelijkse activiteiten en uw fysieke mogelijkheden.

Uw nieuwe rolstoel heeft frequent en schematisch onderhoud nodig. Veel van dit onderhoud kunt u zelf doen. Wij willen u echter aanraden om uw rolstoel minimaal één keer per jaar te laten nakijken door een deskundige.

Let op!

In deze gebruikershandleiding vindt u tevens tips en waarschuwingen. Deze zijn duidelijk te herkennen aan de gebruikte symbolen en de weergave van de tekst, zoals hieronder te zien is.



Tip

De tips die in deze gebruikershandleiding worden genoemd, zijn bedoeld om nog beter gebruik te kunnen maken van uw Travixx Comfort Lite Plus.




Waarschuwing

De waarschuwingen die in deze gebruikershandleiding genoemd worden, dienen altijd opgevolgd te worden, om schade aan de Travixx Comfort Lite Plus of letsel aan uzelf te voorkomen.

1. Identificatie

Uw rolstoel is voorzien van een uniek identificatienummer. U kunt dit nummer terug vinden op het frame van uw rolstoel. Hieronder vindt u een voorbeeld van het framelabel waarop u het identificatienummer kunt vinden. Tevens vindt u hieronder uitleg van de verschillende gegevens die op het framelabel vermeldt staan.

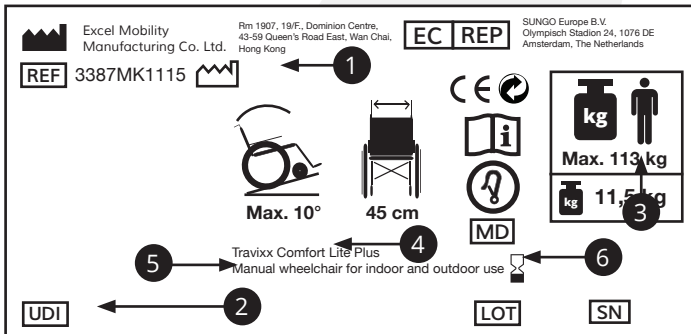

1. Productie datum

De datum waarop uw rolstoel is gefabriceerd.

2. Serienummer

Iedere rolstoel heeft zijn eigen unieke serienummer. U dient dit nummer bij de hand te hebben als u technische vragen heeft of onderdelen wilt bestellen voor uw rolstoel.

3. Maximum gewicht

Het maximaal toelaatbare gebruikersgewicht voor uw rolstoel.

4. Modelnaam

De modelnaam op het label van uw rolstoel begint met de merknaam Travixx. De naam Travixx en een aanvullende model beschrijving (Comfort Lite Plus) vormen de volledige officiële modelnaam van uw rolstoel. Wanneer u vragen heeft of meer informatie wilt over uw rolstoel, is het belangrijk om de volledige modelnaam van uw rolstoel te vermelden.

5. Beschrijving

Het beoogde gebruik van uw rolstoel.

6. Vervaldatum

Naast het zandloper symbool vindt u de vervaldatum van het product. Tot deze datum loopt de gegarandeerde levensduur. De gegarandeerde levensduur van het product is 8 jaar na de productie datum. Bij goed onderhoud en gebruik volgens de voorschriften in deze handleiding gaat het product wellicht langer mee, maar na deze datum vervalt de aansprakelijkheid van de fabrikant.

2. Algemene informatie

2.1. Componenten en opbouw van uw rolstoel

1. Ergonomisch gevormde duwhandvatten
2. Rugleuning
3. Armleuningen
4. 24" CFL achterwielen (Quick-Release)
5. Zitting
6. Beensteunen
7. Rem
8. Anti-tip wielen met geïntegreerde stepper
9. Voetplaten
10. 7" voorwielen (zwenkwieltjes)
11. Voorvorken



Uw rolstoel is voorzien van verschillende componenten en onderdelen. Leer deze kennen voordat u verder gaat met het bestuderen van deze gebruikershandleiding. Ontwerpen en specificaties kunnen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

2.2 Algemene uitleg over uw rolstoel

Uw nieuwe Travixx Comfort Lite Plus is een lichtgewicht rolstoel. De rolstoel is voorzien van ergonomisch gevormde duwhandvatten, zodat uw begeleider de rolstoel gemakkelijk voort kan duwen. De armleuningen van de rolstoel zijn wegklapbaar naar beneden. De beensteunen van de Travixx Comfort Lite Plus zijn wegzwenkbaar naar de zijkant en afneembaar. Om de rolstoel goed op te kunnen vouwen, zijn de voetplaten opklapbaar. Bovendien zijn de voetplaten in hoogte verstelbaar. Dit kan echter alleen met de bijgeleverde inbussleutel. Ten slotte is de rolstoel voorzien van 7" voorwielen en 24" achterwielen. De 24" achterwielen zijn afneembaar op basis van het Quick-Release systeem. Dit betekent dat u de achterwielen eenvoudig af kunt nemen om zo de rolstoel eenvoudiger te kunnen vervoeren.

3. Veiligheidsvoorschriften

Medipoint stelt zich niet verantwoordelijk voor verwondingen aan de gebruiker of schade aan eigendommen, indien bij het gebruik van de rolstoel de aanbevelingen en waarschuwingen uit deze gebruikershandleiding niet zijn opgevolgd. De Travixx Comfort Lite Plus is, indien de omgangsregels zoals deze beschreven staan in deze gebruikershandleiding worden opgevolgd, een uiterst veilig en stabiel product. Het is echter wel mogelijk dat, wanneer de rolstoel niet correct wordt gebruikt, er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

3.1 Algemene veiligheidsvoorschriften

Bescherm uw aankoop door uw rolstoel regelmatig te laten controleren. Wanneer er een deel van uw Travixx Comfort Lite Plus niet goed functioneert, is het mogelijk dat er een gevaarlijke situatie ontstaat. U dient uw rolstoel in goede staat te houden om de veiligheid te garanderen. Periodieke inspectie, een correcte instelling van uw rolstoel en tijdige vervanging van kapotte en versleten onderdelen zullen bijdragen aan een lange levensduur van het product. Een gekwalificeerde Medipoint vestiging, die alleen Travixx vervangingsonderdelen zal gebruiken, zal er voor zorgen dat de lange levensduur gewaarborgd blijft door goed en preventief onderhoud.

3.2. Waarschuwingen voor veilig gebruik

Om schade aan uw eigendommen, de rolstoel zelf of letsel aan de gebruiker te voorkomen, dient u onderstaande waarschuwingen in acht te nemen. Medipoint is in geen enkele vorm aansprakelijk, mits deze waarschuwingen correct worden nageleefd. Na het lezen van deze waarschuwingen gaat u akkoord met de in deze gebruikershandleiding genoemde voorwaarden.

- Controleer bij ontvangst altijd of alle componenten van de rolstoel aanwezig zijn en of deze eventueel beschadigd zijn. Indien er componenten ontbreken of er beschadigingen zijn, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw leverancier;
- Gebruik uw rolstoel niet op straten of autowegen. De rolstoel dient altijd op de stoep gebruikt te worden;
- Gebruik uw rolstoel niet op oneffen ondergronden, zoals zand, grind of ruig terrein en niet op natte, gladde ondergronden waar u geen grip heeft;
- Leun nooit op de duwhandvatten van de rolstoel. Hierdoor kan de rolstoel achterover kantelen;
- Zorg er voor dat bij het op- en/of afgaan van een verhoging, de anti-tip wielen bevestigd zijn;
- Ga nooit zonder begeleiding / assistentie een verhoging op en/of af;
- Wanneer u voorover leunt in de rolstoel, dient u achterin de rolstoel te gaan zitten om te voorkomen dat u voorover valt;
- Als u in of uit de rolstoel gaat, dient u deze op de rem te zetten en de zwenkwielletjes aan de voorzijde volledig naar voren te plaatsen;
- Ga bij het uitstappen nooit op de voetsteunen staan. Hierdoor ontstaat het risico dat de rolstoel kantelt;
- Zorg er voor dat de rolstoel bij het in- en uitstappen op een vlakke ondergrond staat;
- Tijdens het gebruik maken van de rolstoel dienen de voetsteunen ten minste 7 cm vrij te zijn van de grond;
- Het maken van een 'wheellie' (het achterover hellen van de rolstoel tot hij in evenwicht is) kan leiden tot schade aan de rolstoel en/of letsel aan de gebruiker. Wij raden dit daarom ten strengste af;
- Wanneer de rolstoel in een lift of op een rolstoellift wordt gebruikt, dient de rolstoel ten alle tijden op de rem te staan;
- Het vervoeren van de rolstoel in alle voertuigen is voor uw eigen risico. Medipoint aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid hiervoor;
- Wanneer u de rolstoel gaat vervoeren, raden wij u aan om dit te doen na overleg met de vervoerder, de

leverancier en/of de fabrikant van taxifixatie systemen, om na overleg een passend systeem te kiezen voor het vervoeren van de rolstoel;

- Tijdens het vervoeren van de rolstoel geldt de rolstoel niet als stoel in een motorvoertuig;
- Maak nooit gebruik van uw rolstoel als deze kapot is;
- Ga nooit staan op uw rolstoel;
- Maak nooit iets vast aan de wielen van de rolstoel. Hierdoor bestaat de kans dat de rolstoel kantelt;
- Wanneer de rolstoel op de rem staat, dient u de rolstoel niet voort te duwen. Hierdoor zal schade ontstaan aan de wielen en ontstaat er gevaar voor de gebruiker;
- Overschrijdt het maximale gebruikersgewicht nooit. U kunt het maximale gebruikersgewicht vinden op het framelabel dat op het frame van de rolstoel is geplakt;
- De rolstoel is geschikt voor één persoon. Neem ook niemand op schoot als u gebruik maakt van de rolstoel;
- Plotseling veranderen van richting zorgt er voor dat de rolstoel uit balans raakt. U dient dit te voorkomen door dezelfde richting aan te houden wanneer u gebruik maakt van de rolstoel;
- Ga nooit zelfstandig een verhoging of helling op die steiler is dan 5°. Mocht u toch een verhoging of helling op gaan die steiler is dan 5°, doe dit dan samen met uw begeleider;
- Wanneer u wijzigingen aanbrengt aan de rolstoel die niet in deze gebruikershandleiding worden beschreven, vervalt het recht op garantie volledig.



Waarschuwing

Het doorvoeren van aanpassingen aan de Travixx Comfort Lite Plus, waarbij er structurele wijzigingen worden doorgevoerd, gaat ten alle tijden ten koste van de garantie.

4. Gebruikersinstructies

Het is belangrijk dat u uzelf de juiste, veilige gebruikersinstructies aanleert. Daarvoor dient u alle, in deze gebruikershandleiding beschreven componenten van de rolstoel te kennen. Raadpleeg altijd een deskundige voor ondersteuning bij het ontwikkelen van de juiste, veilige methodes met betrekking tot uw fysieke mogelijkheden, om gebruik te kunnen maken van de rolstoel.

4.1 De balans

Dagelijkse handelingen zoals het in- en uitstappen, het reiken en het buigen in de rolstoel zullen van invloed zijn op de balans van de rolstoel. Dit heeft te maken met de gewichtsverdeling en de verandering van het middelpunt van de zwaartekracht. De standaard anti-tip wielen op uw rolstoel zorgen voor extra veiligheid. Controleer altijd of deze op de goede hoogte zijn ingesteld. Om te voorkomen dat de rolstoel kantelt of dat er andere gevaarlijke situaties ontstaan, dient u de hieronder beschreven handelingen op te volgen.

4.1.1 In- en uitstappen

Het in- en uitstappen van de rolstoel is een veelvoorkomende handeling. De moeilijkheden bij het in- en uitstappen zijn onder andere afhankelijk van uw fysieke mogelijkheden. In deze gebruikershandleiding beschrijven wij de handelingen die opgevolgd moeten worden wanneer u zonder hulp in- en uit de rolstoel kunt komen. Wanneer u dit niet meer zelfstandig kunt, raden wij u aan om in overeenstemming met een ergotherapeut uw mogelijkheden te bespreken en te bepalen hoe u het beste in- en uit kunt stappen.

Instappen

Voordat u in gaat stappen, moet u er voor zorgen dat de rolstoel op een vlakke ondergrond staat. Daarnaast moet de rolstoel op de rem staan en dienen de beensteunen naar de zijkanten te worden weggeklapt. Zorg er voor dat de rolstoel zo dicht mogelijk bij u staat en dat de zwenkwielletjes in voorwaartse richting staan. U kunt nu, leunend op de armsteunen, plaatsnemen in de rolstoel de rolstoel.

Uitstappen

Bij het uitstappen dient u dezelfde instructies op te volgen als bij het instappen. Zorg er voor dat de rolstoel zo dicht mogelijk bij de plaats waar u heen wilt staat en zorg dat de zwenkwielletjes in voorwaartse richting staan. Dan zet u de rolstoel op de rem, klapt u de beensteunen naar de zijkanten en kunt u, al leunend op de armsteunen, uit de rolstoel stappen.

4.2 Buigen en/of reiken

Het kan voorkomen dat u in uw rolstoel zit en iets moet pakken. Dit kan naast u zijn, maar ook voor of achter u. Om te voorkomen dat u kantelt met uw rolstoel of uit uw rolstoel valt, wordt hieronder beschreven hoe u het beste kunt buigen en/of reiken uit uw rolstoel.

4.2.1 Naar voren buigen en/of reiken

Als u iets wilt pakken dat voor uw rolstoel ligt, dient u onderstaande stappen te volgen.

- Zorg er voor dat u zo dicht mogelijk bij het object bent met uw rolstoel;
- Zorg er voor dat de zwenkwielletjes in voorwaartse richting staan. Hier kunt u eenvoudig voor zorgen door eerst een stukje naar voren en daarna een stukje naar achteren te rijden met uw rolstoel. Hierdoor draaien de zwenkwielletjes naar voren;
- Zet de rolstoel op de rem aan beide kanten;

- U kunt nu voorover buigen zonder dat u het risico loopt de balans te verliezen.

4.2.2 Naar de zijkant buigen en/of reiken

Als u iets wilt pakken dat aan de zijkant van uw rolstoel ligt, dient u onderstaande stappen te volgen.

- Zorg er voor dat u zo dicht mogelijk bij het object bent met uw rolstoel. Gebruik hiervoor de achterwielen van de rolstoel als richtpunt;
- Zorg er voor dat de zwenkwieltjes in voorwaartse richting staan. Hier kunt u eenvoudig voor zorgen door eerst een stukje naar voren en daarna een stukje naar achteren te rijden met uw rolstoel. Hierdoor draaien de zwenkwieltjes naar voren;
- Zet de rolstoel op de rem aan beide kanten;
- U kunt nu naar de zijkant buigen zonder dat u het risico loopt de balans te verliezen. Zorg er voor dat u tijdens het optillen zo dicht mogelijk langs de rolstoel beweegt.

4.2.3 Naar achteren buigen en/of reiken

Als u iets wilt pakken dat aan de achterkant van uw rolstoel ligt, dient u onderstaande stappen te volgen.

- Zorg er voor dat u zo dicht mogelijk bij het object bent met uw rolstoel. Maak gebruik van uw achterwielen van de rolstoel. Zet deze bijvoorbeeld tegen een kast aan als hetgene dat u wilt pakken in een kast ligt;
- Zet de rolstoel niet op de rem. Mocht u de balans kwijt raken kunt u beter naar achter rijden dan dat de rolstoel naar achteren kantelt;
- U kunt nu naar achteren buigen zonder dat u het risico loopt de balans te verliezen. Buig echter niet te ver naar achteren. Dan zal de rolstoel alsnog kantelen.

4.3 Het op- en afgaan van verhogingen

Het kan voorkomen dat u met uw rolstoel een verhoging op of af dient te gaan. Daarbij beschrijven we in deze gebruikershandleiding eerst hoe u dit zelfstandig doet en daarna hoe u dit met een begeleider kunt doen.

4.3.1 Het opgaan van een verhoging

Als u zelfstandig een verhoging op wilt gaan, doet u dit in een voorwaartse beweging. Zorg er voor dat uw gewicht zo ver mogelijk naar voren wordt gebracht door voorover te buigen. Door nu een zogenaamde 'wheely' te maken, worden de zwenkwieltjes aan de voorzijde gelift. Op deze manier kunt u op een verhoging komen met uw rolstoel.



Waarschuwing

U dient alleen een verhoging op te gaan nadat u met een specialist, zoals een ergotherapeut, heeft overlegd hoe u dit het beste kunt doen.

U kunt ook een verhoging opgaan met behulp van uw begeleider. Dit kan op twee manieren.

Uw begeleider dient de rolstoel in voorwaartse beweging voor de verhoging te plaatsen. Door op de duwhandvatten te drukken komen de zwenkwieltjes aan de voorkant los van de grond. Tegelijkertijd dient de begeleider zijn voet te plaatsen op de trapdop. Er zal nu een hefboom effect ontstaan, zo kan de rolstoel op de verhoging worden gereden.

Uw begeleider dient de rolstoel in achterwaartse beweging voor de verhoging te plaatsen. Door zelf zo ver mogelijk naar achteren te gaan zitten in de rolstoel en de rolstoel licht naar achteren te kantelen, kan uw begeleider de rolstoel op de verhoging trekken. Uw begeleider mag de rolstoel pas laten zakken als de zwenkwielletjes op de verhoging staan.

4.3.2 Het afgaan van een verhoging

Als u zelfstandig een verhoging af wilt gaan, dient u dit altijd achterwaarts te doen. Wanneer u dit voorwaarts doet, is het risico dat u kantelt met uw rolstoel erg groot. U dient echter wel vooraf te oefenen met een ergotherapeut voordat u zelfstandig een verhoging af gaat met uw rolstoel.

Wij raden u aan om een verhoging af te gaan met een begeleider. Uw begeleider rijdt uw rolstoel tot aan de rand van de verhoging. Nu dient de gebruiker achterover te leunen en de begeleider de rolstoel achterover te kantelen. Wanneer de rolstoel in balans is kan uw begeleider de rolstoel rustig van de verhoging af laten gaan. De rolstoel mag pas weer verder gebruikt worden wanneer de zwenkwielletjes de grond weer raken.

4.4 Het op- en afgaan van hellingen

De meeste mensen kunnen zelf een korte en niet te steile helling beklimmen. Dit is afhankelijk van uw fysieke mogelijkheden en de gradatie van de helling. De meeste mensen ontwikkelen daarom ook zelf methodes om een helling op en af te gaan. Mocht het nodig zijn dat u tijdens het op- of afgaan van een helling moet stoppen, maak dan geen onverwachte bewegingen die een kanteling kunnen veroorzaken.



Tip

Zorg er voor dat u de helling heeft geïnspecteerd voor het op- en afgaan. Op die manier weet u wat u kunt verwachten en kunt u de helling veilig op- of afgaan.

4.4.1 Het opgaan van een helling

Wanneer u zelfstandig een helling op gaat, adviseren wij u om uw bovenlichaam voorover te buigen. Hierdoor verlegt u het zwaartepunt naar voren en is het eenvoudiger en veiliger om een helling op te komen. De anti-tipwielen verhogen de veiligheid tijdens het opgaan van een helling. Daarnaast is het belangrijk om geen extra gewicht zoals tassen aan uw rolstoel te hangen. Hierdoor ligt het zwaartepunt achter op de rolstoel en is de kans op kantelen groter.

Wanneer uw begeleider u omhoog duwt, dient hij of zij zich er van bewust te zijn dat hiervoor voldoende spierkracht nodig is.



Waarschuwing

Wees altijd voorzichtig bij het op- en afgaan van een helling. Een helling die steiler is dan 5° is al gevaarlijk om op of af te gaan met uw rolstoel.

4.4.2 Het afgaan van een helling

Zorg er voor dat bij het afgaan van een helling de voetsteun minimaal zeven centimeter van de grond verwijderd is. Houdt ook altijd uw gezicht naar voren als u een helling afgaat. Leun echter nooit naar voren wanneer u een helling afgaat. Dit kan resulteren in het voorover kantelen van de rolstoel. Om de stabiliteit te verhogen kunt u beter licht naar achteren leunen.

Om de controle over uw rolstoel te houden, is het belangrijk dat u niet te snel naar beneden gaat. De snelheid kunt u onder controle houden door de hoeveelheid grijpkracht die u op de hoepels van de rolstoel uitoefent. Bij deze handeling glijden de hoepels door uw handen en ontstaat er wrijving. Om te voorkomen dat u uw handen verbrandt raden wij u aan om handschoenen te dragen. Maak geen gebruik van de wielremmen tijdens het afdalen. Deze remmen zijn alleen geschikt voor gebruik wanneer u stilstaat. Voorkom daarnaast ook dat u niet van richting verandert tijdens het afdalen. Hierdoor wordt de kans groter dat u omvalt. Als uw begeleider u ondersteunt bij het afdalen, dient hij of zij zich er van bewust te zijn dat er een behoorlijke trekkracht moet worden uitgeoefend.



Waarschuwing

Als u met uw rolstoel een trap op gaat, dient u maximaal één traprede tegelijk te nemen. Hiermee voorkomt u het risico dat u van de trap valt met uw rolstoel.

4.5 Het op- en afgaan van trappen

Eén van de grootste obstakels voor rolstoelgebruikers zijn trappen. Het is echter wel mogelijk om, samen met twee begeleiders, een trap op of af te gaan met uw rolstoel. U en uw begeleiders moeten zich wel beseffen dat er een behoorlijk gewicht verplaatst moet worden.

4.5.1 Het opgaan van een trap

Wanneer u met uw rolstoel een trap op wilt gaan, moet dit altijd achterwaarts worden uitgevoerd. Zorg er voor dat er één begeleider aan de voorkant staat en één begeleider aan de achterkant. De begeleider die achter de rolstoel staat, pakt de duwhandvatten van de rolstoel vast en kantelt de rolstoel tot deze in balans is en het zwaartepunt zich op het laagste punt bevindt. Wanneer de rolstoel gekanteld is en de rolstoel alleen op de achterwielen rust, pakt de begeleider die aan de voorzijde staat het zijframe vast. Op dat moment staat de rolstoel in de juiste positie om de trap op te gaan. De begeleider aan de voorzijde tilt de rolstoel op aan het zijframe, terwijl de begeleider aan de achterzijde één trede omhoog loopt en tegelijkertijd de rolstoel met zich mee tilt omhoog. Herhaal deze handeling tot u boven aan de trap bent. Laat de rolstoel pas weer op de zwenkwielletjes rusten zodra de rolstoel in zijn geheel boven aan de trap is en rust op een vlakke ondergrond.



Waarschuwing

Als uw begeleider de rolstoel vastpakt om een trap op of af te gaan, dan dient uw begeleider dit nooit aan de beensteunen te doen. De beensteunen zijn hier niet stevig genoeg voor.

4.5.2 Het afgaan van een trap

Voor het afgaan van een trap gelden in principe dezelfde handelingen als het opgaan van de trap. Zorg er voor dat er één begeleider aan de voorkant staat en één begeleider aan de achterkant. De begeleider die achter de rolstoel staat pakt de duwhandvatten van de rolstoel vast en kantelt de rolstoel tot deze in balans is en het zwaartepunt zich op het laagste punt bevindt. Wanneer de rolstoel gekanteld is en de rolstoel alleen op de achterwielen rust, pakt de begeleider die aan de voorzijde staat het zijframe vast. Op dat moment staat de rolstoel in de juiste positie om de trap af te gaan.

Nu tilt de begeleider aan de voorzijde echter de rolstoel op aan het zijframe en duwt de begeleider aan de achterkant de rolstoel rustig vooruit, zodat de achterwielen één trede naar beneden worden geduwd. De begeleider die aan de voorzijde van de rolstoel staat moet zich er van bewust zijn dat er een flink gewicht moet worden opgevangen.

5. Specificaties

Hieronder vindt u de technische specificaties van de Travixx Comfort Lite Plus.

Technische specificaties van de Travixx Comfort Lite Plus

Totale lengte	102 cm (incl. voetsteunen)
Totale breedte	65 cm
Totale hoogte	93-97 cm (hoogte duwhandvatten)
Totale gewicht	11,5 kg
Gebruikersgewicht	Max. 113 kg
Zitbreedte	45 cm
Zitdiepte	42 cm
Zithoogte	50 cm
Rughoogte	43 cm



6. Componenten van de Travixx Comfort Lite Plus

In dit hoofdstuk worden de verschillende componenten van de Travixx Comfort Lite Plus beschreven. Op de rolstoel zijn een aantal componenten aanwezig die in- en verstelbaar zijn. Als u één van de componenten wilt plaatsen of afnemen, in- of verstellen of wilt verplaatsen, dient u altijd de aanwijzingen op te volgen die in deze gebruikershandleiding worden beschreven.

6.1 Het in- en uitvouwen van de rolstoel

Als u de rolstoel wilt in- of uitvouwen, zijn er een aantal stappen die u moet volgen. Bij het in- en uitvouwen van de rolstoel dient u altijd voorzichtig te zijn, zodat de rolstoel niet beschadigd raakt.

6.1.1 Het invouwen van de rolstoel

Als u de rolstoel in wilt vouwen, dient u de volgende stappen te volgen.

- Voordat u de rolstoel in kunt vouwen, moeten de voetplaten worden opgeklapt. Op foto 1 ziet u hoe de voetplaten van de rolstoel er uitgevouwen uit zien. Door de voetplaten op de klappen (foto 2), kunt u de rolstoel invouwen;
- De bekleding zit bevestigd met behulp van klittenband. Verwijder de bekleding van de rolstoel. Trek vervolgens de flap aan de onderkant van de zitting los (foto 3);
- Om de rolstoel in te vouwen, dient u de handeling uit te voeren zoals u deze ziet op foto 4. U trekt aan de voor- en aan de achterkant van de zitting, ter hoogte van het midden aan de zitting;
- U kunt nu in het midden van de zitting, aan zowel de voor- als de achterkant, de zitting volledig omhoog trekken, zoals op foto 4 te zien is;
- Nadat de zitting helemaal omhoog is getrokken, ziet de rolstoel er uit zoals op foto 5 is weergegeven.



TRAVIXX COMFORT LITE PLUS | FOTO 1 TRAVIXX COMFORT LITE PLUS | FOTO 2 TRAVIXX COMFORT LITE PLUS | FOTO 3 TRAVIXX COMFORT LITE PLUS | FOTO 4



TRAVIXX COMFORT LITE PLUS | FOTO 5

6.1.2 Het uitvouwen van de rolstoel

Om de rolstoel uit te vouwen, dient u de volgende stappen te volgen.

- Om de rolstoel uit te vouwen gaat u of voor of naast de rolstoel staan;
- Duw nu op de zitbuizen (de buizen aan de zijkanten van de zitting, waar de zitbekleding omheen bevestigd zit) om de rolstoel uit te vouwen;
- Om er zeker van te zijn dat de rolstoel goed is uitgevouwen, gaat u voor of naast de rolstoel staan en duwt u de zitbuizen zover mogelijk naar buiten;
- Nu kunt u de voetplaten die opgeklapt zijn weer naar beneden klappen.



Waarschuwing

U dient bij het uitvouwen van de rolstoel er zeker van te zijn dat deze volledig is uitgevouwen. De handeling die hierboven is beschreven is hierbij belangrijk.

6.2 De duwhandvatten

De duwhandvatten van de Travixx Comfort Lite Plus zijn ergonomisch gevormd (foto 6). Dit betekent dat uw begeleider goede grip heeft op de duwhandvatten. Hierdoor wordt het voortduwen voor de begeleider niet alleen comfortabeler, maar is de rolstoel ook veiliger voort te duwen.



TRAVIXX COMFORT LITE PLUS | FOTO 6

6.3 De armleuningen

De armleuningen van de Travixx Comfort Lite Plus zijn neerklapbaar naar beneden. Om de armleuningen neer te klappen, dient u de volgende stappen te volgen.

- Hieronder ziet u de armleuning van de Travixx Comfort Lite Plus;
- Om de armleuning naar beneden te klappen, dient u de zilveren button (foto 7) in te duwen zoals op de foto wordt weergegeven;
- U kunt nu de armleuning in de gewenste positie plaatsen (foto 8).



TRAVIXX COMFORT LITE PLUS | FOTO 7 TRAVIXX COMFORT LITE PLUS | FOTO 8

6.4 De rugleuning

De rugleuning van de Travixx Comfort Lite Plus (foto 9) is bevestigd aan de buizen van de duwhandvatten. De rugleuning is half neerklapbaar. Knijp hiervoor met beide handen de hendels aan weerszijden in en vouw de rugleuning achterover, zoals op foto 10 is weergegeven. Om de rugleuning weer terug op te klappen, dient u beide zitbuizen tegelijk weer omhoog te bewegen totdat beide scharnieren terug vastklikken.



TRAVIXX COMFORT LITE PLUS | FOTO 9

TRAVIXX COMFORT LITE PLUS | FOTO 10

TRAVIXX COMFORT LITE PLUS | FOTO 11

6.5 De rem

U kunt uw Travixx Comfort Lite Plus op de rem zetten. Dit is aan te raden bij het in- en/of uitstappen, maar ook wanneer u langere tijd stil staat kunt u de rolstoel het beste op de rem zetten. Als u de rolstoel op de rem wilt zetten, dient u de volgende stappen te volgen.

- Als u in de rolstoel zit en de rolstoel staat nog niet op de rem, krijgt u de situatie zoals deze te zien is op foto 12;
- U kunt met de remhendel de rolstoel op de rem zetten. Door de remhendel voorwaarts (van u af) te duwen (foto 13), wordt de rolstoel op de rem gezet (foto 14);
- Als u naast de rolstoel staat en u wilt de rolstoel op de rem zetten, dan dient u dezelfde handelingen uit te voeren. Wees hierbij wel voorzichtig zodat de rolstoel zich niet verplaatst.



TRAVIXX COMFORT LITE PLUS | FOTO 12

TRAVIXX COMFORT LITE PLUS | FOTO 13

TRAVIXX COMFORT LITE PLUS | FOTO 14

6.6 De beensteunen

De beensteunen van de Travixx Comfort Lite Plus zijn zowel wegklapbaar naar de zijkant als afneembaar. Om de beensteunen weg te klappen en eventueel af te nemen, dient u de volgende stappen te volgen.

- Op foto 15 ziet u de beensteunen van de rolstoel;
- Door de zwarte hendel omhoog te trekken (foto 17), kan de beensteun in beweging komen;
- Op foto 18 ziet u dat de beensteun nu naar buiten kan worden geklapt;
- Als u de beensteun af wilt nemen, kunt u de beensteun omhoog trekken. Dit kunt u doen wanneer de beensteun niet verder kan worden weggeklapt;
- De beensteun komt los wanneer deze over de verhogingen is gekomen die aan de zijkant van het frame zitten;
- Om de beensteunen weer te plaatsen kunt u de beensteunen over de verhogingen plaatsen die aan de zijkant van het frame zitten en draait u de beensteunen in positie tot u een klik hoort. Deze klik is een bevestiging dat de beensteunen op de juiste manier bevestigd zijn.



TRAVIXX COMFORT LITE PLUS |
FOTO 15



TRAVIXX COMFORT LITE PLUS |
FOTO 16



TRAVIXX COMFORT LITE PLUS |
FOTO 17



TRAVIXX COMFORT LITE PLUS |
FOTO 18



TRAVIXX COMFORT LITE PLUS |
FOTO 19

6.7 De voetplaten

Aan de beensteunen zijn ook voetplaten bevestigd. Deze zijn zowel opklapbaar als in hoogte verstelbaar.

6.7.1 De voetplaten opklappen

U kunt de voetplaten opklappen door de volgende stappen te volgen.

- Op foto 20 ziet u hoe de rolstoel er uit ziet als de voetplaten niet opgeklapt zijn;
- U kunt de voetplaten opklappen door de voetplaten simpelweg omhoog te duwen, zoals op foto 21 te zien is;



TRAVIXX COMFORT LITE PLUS | FOTO 20



TRAVIXX COMFORT LITE PLUS | FOTO 21

6.7.2 De voetplaten in hoogte verstellen

Het is ook mogelijk om de voetplaten in hoogte te verstellen. Hier heeft u echter wel een inbussleutel voor nodig. Aan de achterkant van de stang van de beensteun bevindt zich een schroef (foto 22) die u met behulp van een inbussleutel kunt verwijderen. Vervolgens kan de binnenstang met de voetplaat omhoog of omlaag geschoven worden. Zorg dat de gaatjes van de binnenstang en buitenstang elkaar overlappen. U kunt nu de schroef terugplaatsen en weer aandraaien met de inbussleutel. De voetplaten hebben op de laagste stand nog altijd een bodemvrijheid van 7 cm (foto 23). Let er bij het in hoogte verstellen van de voetplaten op dat de knie van de inzittende nooit naar boven wijst, maar stel de hoogte zo in, dat het bovenbeen nagenoeg horizontaal ligt (foto 24). Dit is de meest comfortabele zitpositie.



TRAVIXX COMFORT LITE PLUS | FOTO 22



TRAVIXX COMFORT LITE PLUS | FOTO 23



TRAVIXX COMFORT LITE PLUS | FOTO 24

6.8 De anti-tip wielen

De Travixx Comfort Lite Plus is uitgerust met twee anti-tip wielen inclusief trapdoppen (foto 25). De anti-tip wielen voorkomen dat uw rolstoel achterover kiept. Wanneer u bijvoorbeeld een stoep of verhoging op moet, zorgen de anti-tip wielen voor een extra steunpunt op de ondergrond waarop u rijdt. De trapdoppen kunnen gebruikt worden door de begeleider om met de voet extra kracht te zetten door naar beneden te duwen om de rolstoel iets achterover te kantelen wanneer er een verhoging moet worden overgegaan met de rolstoel (foto 26). U dient echter wel voorzichtig te zijn met de trapdoppen wanneer u hier gebruik van maakt.



TRAVIXX COMFORT LITE PLUS |
FOTO 25

TRAVIXX COMFORT LITE PLUS |
FOTO 26

De anti-tip wielen van de Travixx Comfort Lite Plus kunnen in hoogte versteld worden. Dit kunt u doen door de volgende stappen te volgen:

- Aan elk anti-tip wiel bevindt zich een zilveren ring. Deze kunt u naar u toe trekken, zoals is aangegeven op foto 27;
- Op het moment dat u de zilveren ring naar u toe heeft getrokken, kunt u de anti-tip wielen in hoogte verstellen. Zorg bij het instellen van de hoogte dat de anti-tip wielen een minimale hoeveelheid bodemvrijheid hebben. Zodat deze niet continu de grond raken en zo slijten, maar wel meteen extra steun bieden bij het opgaan van een kleine helling. Stel de anti-tip wielen alleen hoog in wanneer u bijvoorbeeld met hulp van een begeleider een drempel wenst te nemen;
- Zodra de anti-tip wiel in de gewenste positie staat, dient u de zilveren ring los te laten. Op dat moment wordt het systeem gelocked.



TRAVIXX COMFORT LITE PLUS |
FOTO 27



Waarschuwing

Ondanks dat de anti-tip wielen losgekoppeld kunnen worden van de rolstoel, adviseert Medipoint wel om deze altijd te gebruiken om op die manier gevaarlijke situaties te voorkomen. Indien de anti-tip wielen verwijderd zijn of verkeerd ingesteld, is het risico voor de gebruiker.

De anti-tip wielen kunnen eventueel ook losgekoppeld worden van de rolstoel. Om de anti-tip wielen los te koppelen van de rolstoel dient u de zilveren ring naar u toe te trekken en de anti-tip wiel volledig uit de houder te schuiven.

6.9 De wielen

Aan uw rolstoel zijn voor- en achterwielen bevestigd. Deze dient u regelmatig te controleren op slijtage.

6.9.1 De voorwielen

De voorwielen van de rolstoel zijn 7" groot en door middel van een voorvork aan het frame van de rolstoel bevestigd (foto 28). De voorwielen zijn belangrijk bij het sturen van de rolstoel. Wanneer het sturen niet soepel gaat of de voorwielen trillen, zijn de voorwielen niet goed in- en/of afgesteld.



TRAVIXX COMFORT LITE PLUS |
FOTO 28



TRAVIXX COMFORT LITE PLUS |
FOTO 29



TRAVIXX COMFORT LITE PLUS |
FOTO 30

TRAVIXX COMFORT LITE PLUS |
FOTO 31

6.9.2 De achterwielen

De achterwielen van de rolstoel zijn 24" PU banden (foto 29). Deze banden zijn lekvrij. Aan de achterwielen zijn ook hoepels bevestigd. Hiermee kunt u zelf de rolstoel voortbewegen. Bovendien zijn de achterwielen gebaseerd op het Quick-Release systeem. Hierdoor zijn ze eenvoudig af te nemen. Door de zwarte knop (foto 30) in te drukken en tegelijk de wielas uit de buis te trekken, kunt u het achterwiel afnemen. Om het wiel weer terug te plaatsen, houdt u de knop weer ingedrukt en schuift u de pen weer terug in de buis tot u een klik hoort. Controleer hierna altijd of de pen ook weer vast zit in de buis door aan het wiel te trekken zonder de knop in te drukken.

6.10 De zitting

De zitting (foto 32, volgende pagina) van de rolstoel is voorzien van comfortabel materiaal. Hierdoor kunt u comfortabel voor langere tijd in de rolstoel zitten. De rolstoel wordt standaard geleverd zonder zitkussen op de zitting. De rug- en zitbekleding zijn afneembaar dankzij klittenband strips.



TRAVIXX COMFORT LITE PLUS |
FOTO 32

7 Transport en vervoer van de rolstoel

Bij het ontwerp van uw Travixx Comfort Lite Plus is er rekening gehouden met het eenvoudig kunnen vervoeren van uw rolstoel in de auto. Zo is de rolstoel voorzien van een vouwframe. Hierdoor kan de rolstoel opgevouwen worden en heeft de rolstoel een breedte van 33 cm. Bovendien zijn de voet- en/of beensteunen wegzwenkbaar en afneembaar en kan de rugleuning gevouwen worden. Daarnaast zijn bepaalde componenten van de rolstoel te verkleinen. Zo zijn de achterwielen afneembaar, gebaseerd op een Quick-release systeem.

7.1 De rolstoel meenemen in de auto

Om de rolstoel eenvoudig mee te nemen, dient u onderstaande handelingen op te volgen:

- Vouw de rolstoel op volgens de instructies in hoofdstuk 6;
- De rolstoel met losse onderdelen past nu in de kofferbak van de meeste auto's (foto 33);
- Mocht het nodig zijn om de rolstoel nog kleiner te maken, dan kunt u de achterwielen van de rolstoel verwijderen door middel van het Quick-release systeem (zie paragraaf 6.9.2).



TRAVIXX COMFORT LITE PLUS |
FOTO 33

7.2 De rolstoel uitvouwen

Om de rolstoel uit te vouwen dient u onderstaande handelingen op te volgen:

- Maak de achterwielen vast aan het frame van de rolstoel. Dit doet u door de zwarte knop op het achterwiel in te duwen (foto 34) en het achterwiel te bevestigen aan het frame van de rolstoel;
- Ga nu naast de rolstoel staan en duw de zitting aan beide kanten naar beneden door de zitbuizen (buizen aan beide zijkanten van de zitting, waar de zitbekleding omheen bevestigd is) naar beneden te duwen;
- Om er zeker van te zijn dat de rolstoel goed is uitgevouwen, gaat u voor of naast de rolstoel staan en duwt u de zitbuizen zo ver mogelijk naar buiten;
- U kunt nu de beensteunen op de rolstoel plaatsen. Dit kunt u doen door de beensteunen aan de zijkant te plaatsen (foto 36) en dan in de juiste stand te duwen door deze naar binnen te draaien. De beensteunen zullen zich dan vastklikken. De klik die u dan hoort is de bevestiging dat de beensteun op de correcte manier is geplaatst (zie foto 37);
- Ook het eventuele zitkussen kunt u op de zitting plaatsen. De rolstoel is nu weer klaar voor gebruik.

Als u de rolstoel opgevouwen gaat vervoeren in uw auto dient u er zeker van te zijn dat de rolstoel op zijn plaats blijft liggen. Dit kunt u doen door de rolstoel vast te maken. Hiervoor zijn onder andere taxifixatiepunten aanwezig op de rolstoel. Deze zijn aangegeven met stickers met een haaksymbool (foto 38) en geven aan dat dit de punten zijn waarop de rolstoel gefixeerd kan worden door middel van een goedgekeurd veilig taxifixatiesysteem (aanwezig in voertuigen ingericht op vervoer van mensen met een mobiliteits beperking, zoals bijv. een zorgtaxi bus).



TRAVIXX COMFORT LITE PLUS |
FOTO 34




TRAVIXX COMFORT LITE PLUS |
FOTO 35



TRAVIXX COMFORT LITE PLUS |
FOTO 36



TRAVIXX COMFORT LITE PLUS |
FOTO 37

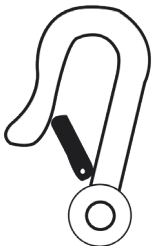

TRAVIXX COMFORT LITE PLUS |
FOTO 38

8 Onderhoud

Uw Travixx Comfort Lite Plus heeft periodiek onderhoud nodig. Dit is noodzakelijk voor een lange levensduur en optimaal voor het gebruikerscomfort van de rolstoel. Een slecht onderhouden rolstoel zal eerder technische problemen geven, zal minder soepel lopen en buiten de garantie vallen. Preventief onderhoud is daarom erg belangrijk. Wij raden u aan om minimaal één keer per jaar uw rolstoel te laten controleren door een gekwalificeerde Medipoint vestiging. Deze vestiging zal, waar nodig, alleen Travixx vervangingsonderdelen gebruiken. Deze jaarlijkse inspectie zal bijdragen aan een lange levensduur van het product.

Zelf kunt u ook veel doen om uw rolstoel in optimale staat te houden. Indien u zelf regelmatig de rolstoel controleert en, waar nodig, klein onderhoud uitvoert, verlengt dit de levensduur van uw rolstoel en verhoogt het uw gebruikersgemak. In de volgende paragrafen wordt dit klein onderhoud verder beschreven.

8.1 De banden

U dient de banden van de rolstoel regelmatig te controleren op slijtage. Mocht de slijtage in een ver gevorderd stadium zijn, dan dient u de banden te vervangen.

8.1.1 PU banden

Polyurethaan (PU) banden zijn lekvrije banden. Deze worden steeds vaker gebruikt op rolstoelen. U kunt deze banden herkennen aan het feit dat er geen ventiel aanwezig is. Het voordeel van deze PU banden is dat deze niet opgepompt hoeven te worden en niet lek kunnen raken. PU banden zijn echter wel onderhevig aan slijtage. Controleer daarom wekelijks of het loopvlak nog voldoende is. Na lange tijd kunnen deze banden hun veerkracht verliezen. Wij adviseren daarom om de banden iedere 36 maanden te wisselen.

8.2 De remmen

Voordat u kunt controleren of de remmen goed werken, dient u er zeker van te zijn dat de bandenspanning in orde is (zie paragraaf 7.1 De banden). Wanneer de bandenspanning in orde is, dient u de remmen te controleren op scherpe randen. Wanneer er scherpe randen op de remmen aanwezig zijn moet u deze laten vervangen. Controleer ook of alle onderdelen van de rem nog goed vast zitten. Dit kan losraken wanneer er veel gebruik wordt gemaakt van de rem. Controleer daarnaast of het remmechanisme soepel functioneert. Mocht dit niet het geval wezen, dan kunt u een paar druppels WD40 olie of Teflon aanbrengen op de draaipunten van de rem. Tenslotte dient u te controleren of de remmen niet in aanraking komen met de banden tijdens het voortbewegen van de rolstoel.

8.3 Het kruisframe

Het kruisframe van uw rolstoel is de basis van uw rolstoel. Daarom dient het kruisframe in goede staat te zijn. Controleer het kruisframe iedere 3 maanden op de volgende punten:

- Controleer of de rolstoel zich gemakkelijk in- en uitvouwt;
- Controleer of de rolstoel zich in één rechte lijn voortbeweegt;
- Controleer of het kruisframe niet verbogen of beschadigd is.

Wanneer één van bovenstaande punten afwijkingen toont, dient u contact op te nemen met de Medipoint vestiging waar u de rolstoel heeft gekocht. Alleen een Medipoint vestiging mag eventuele reparaties doorvoeren aan het kruisframe.

8.4 De achterwielen

De achterwielen van uw rolstoel kunt u ook zelf controleren. Een goede afstelling van de achterwielen verhoogt de stabiliteit van de rolstoel. Tevens zorgt het ervoor dat u minder inspanning hoeft te leveren om de rolstoel voort te bewegen. Controleer de achterwielen iedere maand op de volgende punten:

- Controleer of de achterwielen niet aanlopen;
- Controleer of er speling is op de achterwielen. Als dit het geval is, komt dit vaak doordat de behuizing van de achterwielen los zit.

Wanneer één van bovenstaande punten afwijkingen toont, dient u contact op te nemen met de Medipoint vestiging waar u de rolstoel heeft gekocht. Alleen een Medipoint vestiging mag eventuele reparaties doorvoeren aan de achterwielen.

8.5 De zwenkwieltjes en de voorvork

De zwenkwieltjes aan de voorzijde van de rolstoel en de voorvork waaraan deze zwenkwieltjes zijn bevestigd, dienen soepel te bewegen om goed te kunnen sturen met uw rolstoel. Controleer de zwenkwielen en de voorvork daarom op de volgende punten:

- Controleer of de moer goed zit. Deze moer moet niet te los, maar ook niet te strak zitten. Wanneer de moer te los zit, zullen de zwenkwieltjes gaan trillen of zelfs los raken. Als de moer te vast zit, is de rolstoel moeilijk te sturen.
- Controleer de voorvork van de zwenkwieltjes op slijtage door te testen of de wieltjes nog soepel zwenken.

Wanneer één van bovenstaande punten afwijkingen toont, dient u contact op te nemen met de Medipoint vestiging waar u de rolstoel heeft gekocht. Controleer bovenstaande punten elke 3 maanden. Alleen een Medipoint vestiging mag eventuele reparaties doorvoeren aan de zwenkwieltjes of de voorvork.



Tip

Controleer of de moer goed vastzit aan het zwenkwiel. Dit kunt u doen door aan het zwenkwiel te draaien. Hierbij dient het zwenkwiel langzaam tot stilstand te komen.

8.6 De bekleding

De bekleding van uw rolstoel is ook een belangrijk onderdeel. Gescheurde of versleten bekleding kan geen menselijk gewicht meer dragen en hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Regelmatige controle van uw bekleding is daarom erg belangrijk. Controleer de bekleding van uw rolstoel daarom iedere 3 maanden op de volgende punten:

- Controleer of de textielbekleding gaatjes, scheuren of versleten plekken heeft;
- Controleer de bevestiging van de bekleding en verzeker uzelf ervan dat dit allemaal goed vastzit.

Wanneer één van bovenstaande punten afwijkingen toont, dient u contact op te nemen met de Medipoint vestiging waar u de rolstoel heeft gekocht. Alleen een Medipoint vestiging mag eventuele reparaties doorvoeren aan de bekleding.

8.7 Het reinigen van uw rolstoel

Het reinigen van uw rolstoel is belangrijk en dient regelmatig te worden gedaan. U kunt uw rolstoel het beste iedere week reinigen zoals hieronder beschreven wordt.

- Het reinigen van de stoffering, het chassis en de kunststof componenten kunt u het beste doen met milde zeep en water. Gebruik nooit agressieve schuurmiddelen. Deze schuurmiddelen kunnen de lak beschadigen. Gebruik ook nooit een hoge druk- of stoomreiniger;
- Behandel de lak van uw chassis regelmatig met was. Gebruik echter nooit oplopende of schurende was, schadelijke chemicaliën of siliconenspray;
- Maak de rolstoel na het reinigen altijd goed droog. Zorg er bovendien voor dat uw rolstoel wordt droog gemaakt als deze nat is geworden door bijvoorbeeld een regenbui.

8.8 Periodiek onderhoud aan uw rolstoel

Preventief onderhoud aan uw rolstoel is erg belangrijk en veel van deze zaken kunt u zelf (of uw begeleider laten) doen. Hieronder geven wij u een opsomming van het interval van de hierboven beschreven controle van de onderdelen, die u zelf kunt uitvoeren.

Iedere week

- De bandenspanning controleren.

Iedere maand

- Controleer of de rolstoel nog goed in en uit te vouwen is;
- Controleer of de achterwielen nog eenvoudig in- en uit te nemen zijn;
- Controleer de bekleding op beschadigingen of slijtage;
- Controleer of er voldoende speling op zowel de voor- als de achterwielen zit;
- Controleer of de remmen goed werken.

Ieder kwartaal

- Controleer of alle bouten en moeren nog goed vastzitten en draai deze eventueel weer vast;
- Controleer of alle spaken in de achterwielen nog voldoende op spanning staan;
- Controleer het loopvlak van de banden op eventuele slijtage.

8.9 Jaarlijkse controle en onderhoud

Daarnaast dient uw rolstoel iedere 12 maanden een controlebeurt te ondergaan, eventueel inclusief onderhoud. U dient contact op te nemen met uw Medipoint verkooppunt voor wat betreft eventuele kosten voor de controle/onderhoudsbeurt. Uw dealer dient deze beurt uit te voeren en het onderhoudsschema in te vullen.

Service interval:	Service schema		
Servicebeurt	Goed	Vervangen	Repareren
Banden voor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Banden achter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wiellagers voor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wiellagers achter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Balhoofdlagers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Framedelen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rugbekleding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zitbekleding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Armleggers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Goed	Redelijk	Slecht
Algehele staat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ja	Nee	
Vervolgactie noodzakelijk?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Onderdelen noodzakelijk?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Bijzonderheden:

.....

Monteur en datum:.....

Belanghebbende:.....

9. Probleemanalyse en oplossingen

Het kan zijn dat er problemen zijn tijdens het gebruik van uw Travixx Comfort Lite Plus. De eventuele problemen die voor kunnen komen worden in de tabel hieronder beschreven. Tevens vindt u hier de oplossingen. Wanneer u problemen ondervindt met uw Travixx Comfort Lite Plus die u niet terug kunt vinden in onderstaande tabel, adviseren wij om contact op te nemen met een geautoriseerde Medipoint vestiging.

Problemen	Oplossingen				
	1	2	3	4	5
Er zit speling op de rolstoel	X	X			
De rolstoel piept en/of rammelt		X			
De zwenkwieltjes trillen		X	X		X
De rolstoel loopt zwaar	X			X	
De rolstoel stuurt langzaam	X	X	X		X
De rolstoel wijkt af naar links	X		X		X
De rolstoel wijkt af naar rechts	X		X		X

1	Controleer of de bandenspanning correct is. Zorg ervoor dat de spanning correct en gelijk is in beide banden.
2	Controleer of alle moeren en bouten goed vast zitten.
3	De achterwielen en/of zwenkwieltjes kunnen verkeerd ingesteld zijn. Controleer of beide achterwielen en zwenkwieltjes in gelijke positie zijn gemonteerd.
4	Controleer of de lagers aan vervanging toe zijn.
5	De voorvorken van de zwenkwieltjes kunnen ongelijk ingesteld zijn. Controleer of deze goed zijn ingesteld.

10. Garantie

Vul de relevante gegevens in op pagina vijf en bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig.

10.1 Garantie toepassing

Op uw rolstoel heeft u fabrieksgarantie. Het kan echter ook mogelijk zijn dat uw leverancier een aanvullende garantie heeft aangeboden. In deze gebruikershandleiding gaan we echter uitsluitend in op de fabrieksgarantie die wordt gegeven door Medipoint.

De fabrieksgarantie wordt alleen toegekend aan u als consument. Het is niet toegestaan de garantie commercieel te gebruiken (zoals voor verhuur of institutioneel gebruik). De garantie is beperkt tot defecte materialen en eventuele verborgen gebreken. Medipoint garandeert u de volgende garantietermijnen voor uw Travixx Comfort Lite Plus:

- Garantietermijn zij- en kruisframe: 10 jaar;
- Garantietermijn wielen, remmen, voorvorken, armlenningen, voetsteunen en alle hieronder niet genoemde componenten: 2 jaar;
- Geen garantie op: Gestoffeerde componenten zoals zit- en rugbekleding, armpolsters, kunststof componenten zoals voetplaten, lak, coating en rubberen componenten zoals binnen- en buitenbanden.

10.2 Garantievoorwaarden

De garantieperiode start op de datum van de aankoop van uw rolstoel. Als binnen de garantietermijn uw rolstoel kapot gaat, zal deze worden gerepareerd of vervangen. U dient echter wel een originele aankoopbon van Medipoint te kunnen tonen om de garantie bespreekbaar te maken. Zonder een originele aankoopbon zal de garantie beginnen op de datum waarop Medipoint de rekening naar u heeft gestuurd.

Reparaties en vervangingen zullen uitgevoerd worden bij een geautoriseerde Medipoint vestiging. Om in aanmerking te komen voor de garantie, dient uw rolstoel aan de vereiste verzorging te voldoen. Verder dient u, indien er zich een probleem voordoet, de betreffende Medipoint vestiging onmiddellijk te waarschuwen en deze volledig op de hoogte te stellen van de aard van het probleem. Indien u de rolstoel gebruikt buiten het gebied van de aangewezen Medipoint vestiging die de garantie uit dient te voeren, dan kunnen de werkzaamheden uitgevoerd worden bij iedere andere, door de fabriek aangewezen, vestiging.

Wanneer een onderdeel van de rolstoel dat binnen het garantietermijn valt, reparatie nodig heeft of vervangen moet worden, ten gevolge van een fabriek of materiaal fout, en de rolstoel in het bezit is van de eerste eigenaar, zal het betreffende onderdeel of de onderdelen kosteloos bij de geautoriseerde vestiging gerepareerd of vervangen worden.

De garantie omvat echter geen arbeidskosten die gemaakt worden bij vervanging / reparatie. Ieder vervangen of gerepareerd onderdeel valt onder dezelfde garantievoorwaarden als de totale rolstoel. Onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn vallen normaal gesproken niet onder de garantie, tenzij deze onderdelen slijtage vertonen als direct gevolg van een fabrieksfout.

Onder normale omstandigheden accepteert Medipoint geen verantwoordelijkheid indien de rolstoel vervangen moet worden of reparaties nodig heeft als gevolg van:

- Het niet onderhouden van de rolstoel en de onderdelen in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant of het niet gebruiken van gespecificeerde originele onderdelen;
- Het beschadigen van de rolstoel of de onderdelen door onachtzaamheid, ongeval of verkeerd gebruik;
- Het aanpassen van de rolstoel of de onderdelen, afwijkend van de fabrieksspecificaties, of reparaties die gedaan zijn voordat de service agent gewaarschuwd is;
- Indien het product niet voorzien is van een origineel fabrieks framelabel, zie hoofdstuk 1.

De rolstoel die beschreven en getoond wordt in deze gebruikershandleiding kan in details afwijken van uw eigen model. Echter, alle instructies zijn relevant, onafhankelijk welke details verschillend zijn. Wij houden ons het recht voor om zonder mededeling vooraf, wijzigingen aan te brengen in gewicht, afmeting of andere technische gegevens zoals beschreven in deze gebruikershandleiding. Alle tekeningen, afmetingen en capaciteiten welke in deze gebruikershandleiding getoond worden, zijn ongeveer en hoeven niet volledig in overeenstemming te zijn met de gegeven specificaties.



Waarschuwing

Medipoint kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke consequentie of incidentele schade dan ook. Hoewel deze gebruikershandleiding met zorg is samengesteld, is deze niet uitsluitend. Indien u uw rolstoel niet in overeenstemming met de voorschriften, die in deze gebruikershandleiding staan gaat gebruiken, dient u dit eerst te overleggen met een geautoriseerde Medipoint vestiging. De garantie is uitsluitend geldig gedurende de aangegeven periode en is alleen geldig in Nederland. Indien er aanpassingen aan de rolstoel zijn gedaan, die van structurele invloed zijn op het product, vervalt de garantie volledig. U kunt contact opnemen met Medipoint voor de uitgebreide garantie- en leveringsvoorwaarden en een adressenlijst met geautoriseerde vestigings.

Neem voor de garantieservice contact op met de geautoriseerde vestiging waar u uw rolstoel heeft gekocht. Mocht het voorkomen dat u niet naar tevredenheid wordt geholpen door uw vestiging, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met Medipoint. Ons adres vindt u op de achterzijde van deze handleiding.



Tip

Onderhoud valt niet onder de garantie. Uw vestiging mag afwijken van het onderhoudsinterval.

De Travixx Comfort Lite Plus rolstoel wordt gefabriceerd door Excel Mobility Manufacturing Co. Ltd. in opdracht van Medipoint, geïmporteerd door Van Os Medical B.V. en exclusief verkocht in Nederland door Medipoint.







medipoint



Van Os Medical B.V.
Koperslagerij 3, 4651 SK Steenberg
Nederland



Excel Mobilty Manufacturing Co. Ltd.
Rm 1907, 19/F., Dominion Centre,
43-59 Queen's Road East, Wan Chai,
Hong Kong



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076 DE Amsterdam
Nederland

Medipoint
Reactorweg 160
3542 AD Utrecht
Nederland

☎ +31 (0) 88 10 20 100

✉ info@medipoint.nl

🌐 www.medipoint.nl

Versie nr.: 01-2021